

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-HSP47

Numéro de catalogue: CL488-67863



Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-67863	Numéro d'acquisition GenBank: BC014623	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 871	CloneNo.: 2A8F6
Hôte: Mouse	Nom complet: serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1)	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 46 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG30999	MW observés: 46 kDa	

Applications

Applications testées: FC (Intra), IF	Contrôles positifs: IF : cellules HepG2, cellules HeLa
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées

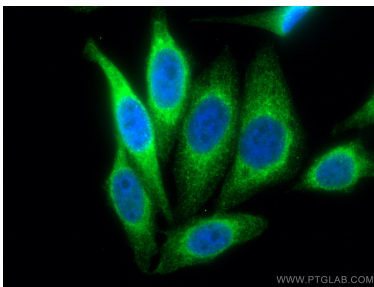

Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 HSP47 antibody (CL488-67863, Clone: 2A8F6) at dilution of 1:200.

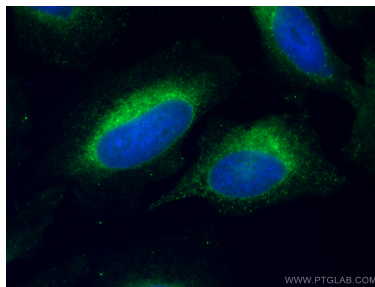

Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 HSP47 antibody (CL488-67863, Clone: 2A8F6) at dilution of 1:200.

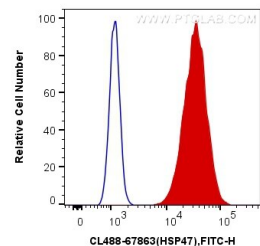

1X10⁶ HepG2 cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human HSP47 (CL488-67863, Clone:2A8F6) (red), or 0.2 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).